


材质：85g书写纸，双面印刷，单黑  
 装订方式：风琴折  
 尺寸：70X110mm

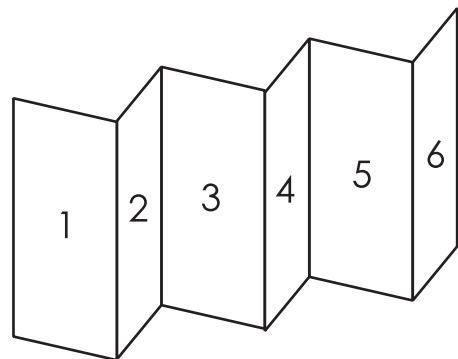

**sOlac**  
音波震動牙刷  
SRM-H10W

產品使用說明書

**產品規格**

產品型號：SRM-H10W  
 刷牙模式：清潔 / 敏感 / 亮白  
 額定電壓/功率：4V = 3W  
 開關方式：輕觸開關  
 顯示方式：LED燈  
 續航時間：120mins  
 充電時間：10hrs  
 充電電流：80mA  
 電池規格：鋰電池800mAh  
 電量提醒：低電量指示燈閃爍顯示  
 防水等級：IPX7

**使用方法**

**刷頭安裝/拆卸**  
 安裝：按照箭頭所示方向，確保刷毛與按鍵同一垂直線上，將牙刷與主機身對準並插入，務必確認安裝至牙刷卡口處為止。

拆卸：一手握住主機手柄，一手握住刷頭柄，進行垂直拔起。按照圖示方向操作即可。

**褪色刷毛提醒**  
 藍色刷毛為提示型刷毛，顏色會隨使用時間漸漸褪色。建議使用3個月後更換刷頭。

**充電座拆裝方法**

安裝時：  
 請提前清理牆面，保持牆面乾燥無塵；拿起底座的貼貼片，撕開貼片背面的膠貼保護膜後，確認方向並保持貼片箭頭向上，用力往貼合位置上按壓；待貼片穩固後，取出充電座對準貼片，順時針旋轉至固定即可。

拆解時：  
 逆時針旋轉充電座，待充電座呈鬆弛狀態時，即可垂直取下。

溫馨提示：  
 膠貼不可貼附在粉刷牆、牆紙、木牆等容易剝落或不平整的粗糙環境中，建議貼附在玻璃、瓷磚等平整光滑的牆面上，避免出現移除時貼片位置損壞或者貼貼不穩等情況。

充電座底部是Type-c金屬充電口，為防止充電口因潮濕產生氧化反應，請將充電座安裝到干燥環境中，充電時確保Type-c接口保持乾燥狀態。為保證壁掛充電的極致體驗，建議貼片背面的膠貼每三個月更換一次。

開/關機  
 開機：點按“電源鍵”，電動牙刷開機，馬達立即開始震動，當前的模式和電量指示燈常亮。  
 關機：牙刷在任意模式工作超過10秒，點按“電源鍵”關機。

**牙齒清潔推薦方法**

使用時請避免用力過大、移動過快。使用過程中如產生刺痛感或口腔不適，請暫停使用本產品。如不適感持續，請諮詢專業醫生。

- 將牙膏擠於刷頭上。
- 將牙齒分為4個區域（上下兩排牙齒分為左右兩個區域）將刷頭放入口中某一區域中，如圖所示。
- 開啟電源，讓刷頭接觸牙齒。（先將刷頭放入口中，再啟動）
- 選擇模式，按下“電源鍵”可自由切換清潔、敏感、亮白模式。
- 按照牙齒外側一組噴部位一牙齒內側的順序進行操作。根據牙刷接觸牙齒的強弱程度，緩慢地移動。
- 牙齒表面及咀嚼部位：以90度角度清潔牙齒。牙齒縫隙：以45度角度清潔。清潔的時候會根據力度的大小，刷頭震動可能會變弱。
- 用清水將刷頭，機身洗淨，擦乾後放在乾燥通風處。

委製/進口商：群光電子股份有限公司  
 地址：新北市三重區光復路二段69號  
 客服電話：0800-828-772  
 http://www.chiconyitd.com/tw/

**功能操作**

啟動/停止  
 短按一次電源鍵可啟動牙刷，牙刷在當前模式工作10秒後，短按電源鍵，可停止牙刷。

模式切換  
 牙刷在當前模式啟動後10秒內，短按機身電源鍵可進行檔位切換。

記憶功能  
 牙刷在任意模式工作時間超過10秒，關機後會記憶該模式，再次開機牙刷以記憶的模式工作。

**模式介紹**

模式設定  
 在開機後10秒內通過輕按“電源鍵”切換模式。

清潔模式  
 38000次/分鐘震動頻率快速去除頑固牙漬。（推薦日常使用）

敏感模式  
 28000次/分鐘震動頻率適合初次及牙齒敏感者使用。

亮白模式  
 48000次/分鐘震動頻率高頻去漬及提高牙齒潔白。

**日常保養**

刷牙  
 每次使用後用清水沖洗乾淨，自然風乾；為了您的體驗以及延長產品壽命，請使用sOlac SRM-H10原裝替換刷頭。

牙刷主機  
 可用清水直接清洗，待自然風乾；請勿用高於40°C的水或酸性清潔液清洗；

感應充電  
 牙刷出廠前會有餘電，請將餘電用儘後再充電；若充電指示燈為紅色連續閃爍時，則需要及時充電；充電過程中，電量指示紅燈以呼吸方式閃亮，充滿電後則白燈常亮；

溫馨提示：  
 · 充電時，請勿在充電座上放置金屬物體，以免發生意外。  
 · 請在電量用完後再充電，以延長鋰電池的使用壽命。

請勿摔落  
 若機身或刷柄損壞，請勿使用。

遠離熱源  
 機身或充電接口不可在高熱環境中使用。

請勿自行拆裝  
 如需修理，請與售後部門聯繫。

**處理電池**

棄置產品時，請不要將其與一般生活垃圾堆放在一起，應將其交給指定回收地點，有利於環保。

內置充電電池含有可能污染環境的物質。丟棄電動牙刷時，一定要將電池取出，送到官方指定的回收站；或將電動牙刷送到官方指定的回收站。

如果您取出電池遇到問題，您也可以將電動牙刷送至群光客服中心。維修中心的工作人員會幫您取出電池，並以環保的方式處理。

卸下電動牙刷的充電電池，只有在丟棄電動牙刷時才可以取下充電電池，請確保在取下電池時電量完全耗盡。

**具體操作步驟：**

- 切斷電動牙刷電源
- 讓電動牙刷停止運行
- 擰下電動牙刷底蓋
- 拆下後蓋
- 取出電池

注意：取出電池後，請勿將電動牙刷與電源相連

**限用物質含有情況聲明**

單元	限用物質及其化學符號				
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯醚(PBDE)
外殼塑料	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○
電路控制組件	—	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○

備考1.「超出0.1wt%」及「超出0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note 1: Exceeding 0.1wt% and exceeding 0.01wt% indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2: 「○」indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.「—」係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3: The「—」indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

**注意事項**

Q：牙刷震動好像越來越弱了？  
 A：可能刷頭與主機連接過緊，請將刷頭拆下再安裝。

Q：我已經充電了，但續航時間還是很短？  
 A：請確定充電時牙刷是否垂直放置造成充電效果不佳；若問題仍未能解決，可能是電池已達到使用壽命，請聯繫群光客服部門更換。

Q：閒置電動牙刷一段時間不用，再充電指示燈不亮。  
 A：六個月以上不使用，電池會進入休眠狀態，再次充電後需要5-20分鐘的甦醒時間，屬於正常現象，請放心使用。

Q：電動牙刷不能啟動怎麼辦？  
 A：請考慮是否因電量不足，充電後即可繼續正常使用；若充電後仍無法啟動，請聯繫群光客服部門進行維修或更換。

**產品保證書**

· 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。  
 · 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。  
 · 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。  
 · 保固期間被如下列之情況亦酌收材料工本費：

- 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
- 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
- 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
- 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
- 消耗品、附件等(專用刷頭)，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
- 若遺失本保證書，恕不補發。

**sOlac 音波震動牙刷 SRM-H10W**

購買日期： 年 月 日  
 (保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)