

Mini3-白色基础款+紫色基础款-冲牙器说明书

材质：85g 铜板纸 A1
印刷：两面印刷
装订方式：风琴折叠

70mm

70mm


70mm

70mm

70mm

70mm


sOlac

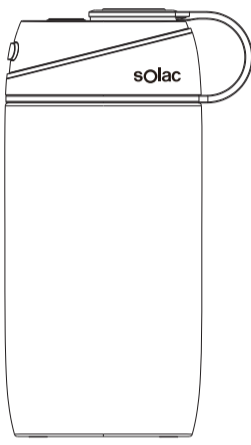

sOlac
智能行动式冲牙机

SRM-M3W
产品使用说明书

基本说明

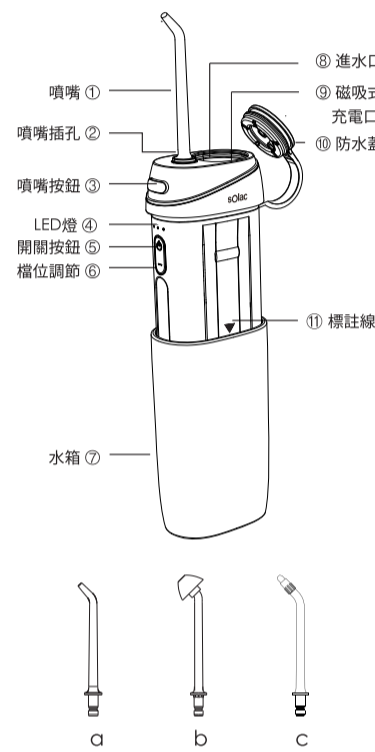

- a. 标准通用喷嘴：清潔牙齒，用於日清潔齒間殘留
- b. 洗鼻專用噴嘴：深層清潔，保持鼻腔健康
- c. 矯正專用噴嘴：錐形刷毛設計，配合脈衝水流，幫助清潔牙套周圍難清理部位


工作模式：脈衝／輕／標準
額定電壓：5V ---
額定功率：8W
水 壓：4.5g-11g (標準噴嘴)
脈衝頻率：高檔脈衝1600次/分鐘
充電時間：約3.5hrs
水箱容量：140ml
電池規格：14650 1050mAh 3.6V 鋰電池

使用指南

▶ 充電


- a. 關閉開關。
- b. 收回本體。
- c. 將磁吸式充電線連接充電口。
- d. 將插頭插入電源插座，確認指示燈亮起。
- e. 當充電時，充電指示燈進入白色呼吸狀態；充滿電後，停止閃爍並亮白燈；充電時間大約3.5小時完成。充滿一次電可使用約150分鐘(脈衝模式)。

警告：充電時水箱不能拉出，須把水箱和主機合起來。充電時需保持充電口乾燥。

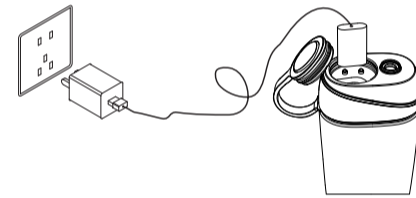

▶ 噴嘴的安裝和拆卸


- a. 將噴嘴從噴嘴儲存盒取出。
- b. 將噴嘴裝入噴嘴插孔。
- c. 牢固插入直至發出咔嚓聲。
- d. 拆卸時長按噴嘴按鈕，輕輕拉出噴嘴。
- e. 將噴嘴放入噴嘴儲存盒。

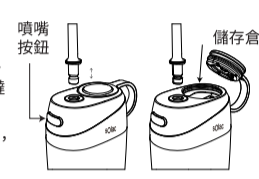

警告：在運行時，不要按壓噴嘴開關。

▶ 蓄水方式

- a. 打開防塵蓋。
- b. 把沖牙器直立，水箱進水口朝上加滿水。
- c. 注入水後，關閉防塵蓋。

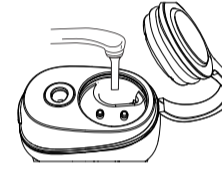

建議使用乾淨的自來水，如果感覺水溫低，可使用不超過40°C的溫水，也可注入淡鹽水、漱口水等，具體配比根據醫生囑咐。

▶ 開關及模式選擇

- a. 按下開關開機。
- b. 通過模式切換鍵切換模式(脈衝模式、輕柔模式、正常模式)建議從輕柔模式開始，也可根據適應度逐漸加強。
- c. 本產品具有模式記憶功能，按下開關後，在任一模式停留“5秒”以上，下次開機時，將自動跳轉被記憶的模式。



▶ 洗牙操作流程和方法

- a. 標準通用噴嘴，按下開關按鈕，選擇所需模式，使用時將其對準牙齒、牙縫或牙齦，保證水流垂直於沖洗部位。
- b. 應格外留意牙齒之間和牙套周圍區域。
- c. 牙齒敏感者，建議選擇輕柔模式。
- d. 在使用過程中保持產品直立，防止水箱內的吸水管脫離，脫離可能會導致水流停止。



▶ 洗鼻操作流程和方法

- a. 首次使用建議選擇輕柔模式，先俯身在洗漱台上方，保持張口呼吸。然後微微傾斜頭部，方便水流流出；其次使用嘴巴呼吸，不用鼻腔呼吸，並輕輕將噴頭緊貼一側鼻孔進行清洗。
- b. 清洗時水流會從另外一側鼻孔裡流出來，或直接從口中排出。通過清洗鼻腔，可以保持鼻腔衛生。



清潔和保養

▶ 使用後


- a. 關閉電源，打開水箱蓋，將水倒出。
 - b. 按下開關按鈕，將水箱內殘留的水排乾後，將其從底部推至最上，並關閉水箱蓋。
 - c. 本產品採用IPX7級防水設計，可直接在水龍頭下清洗。
 - d. 徹底清洗乾淨後，擦乾水份，置於乾燥處。
- 注：合上水箱時，一定要打開水箱蓋，否則水箱無法合上。本產品設計為全身水洗，IPX7級防水，適合用在打開的水龍頭下進行清洗。警告：將手持部分與電源軟線分開後，才能在水中清洗手持部分。



委製/進口商：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
客服電話：0800-828-772
<http://www.chiconytd.com/tw/>

▶ 保養

- a. 噴嘴：用水清洗，然後用布擦乾，建議每6個月更換一次噴嘴，如果噴嘴頂端變形，請及時更換否則，會影響使用甚至發生故障。
- b. 機身：可用質地柔軟的布蘸少量溫水和的清潔劑擦拭。
- c. 吸管：可直接清洗，也可拆下來清洗(在吸管連接機身的部位輕輕地向外)清洗完畢後，將吸管對準連接口安裝回去，用布擦乾，請勿隨意彎折吸管，否則會影響使用和發生故障。
- d. 過濾網：過濾網需定期清潔，建議每三個月清潔一次。
- e. 儲水箱：水箱採用便於清潔的可拆卸設計，建議每週清潔一次。

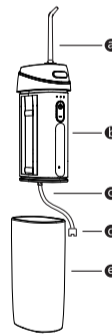

注：請勿使用高於50°C的熱水清洗。
溫馨提示：請勿使用稀釋劑、酒精等刺激清洗劑，否則將導致產品褪色和故障。

注意事項

1. 充電時須保持充電口乾燥。
2. 不要插入電壓系統不同的電壓設備。
3. 不要用濕手觸摸充電器。
4. 如出現產品有損壞，及產品本身不能正常工作的情況，請不要使用。
5. 不要直接把水噴入舌下，耳朵以及其他部位，水柱力可能對這些部位造成傷害。
6. 當有牙齒疾病時，請在您的牙醫指導下使用本產品。
7. 本產品可配合漱口水或牙醫推薦的解決方案藥水使用。
8. 非專業人士不要拆卸本機或插入任何異物。
9. 建議不要在戶外惡劣條件下使用本產品。
10. 不要在產品水箱中添加鹽、漂白劑或非水溶性精油等物質，使用這些物質會影響產品的性能和縮短產品壽命。

11. 在使用本產品前，請移除口腔內所有的珠寶鑲嵌物。
12. 如果您的舌頭和口腔內有明顯的傷口請不要使用本產品。
13. 如您的醫生建議您在用藥時使用抗生素，那麼在使用本產品或任何工具前應諮詢您的牙醫。
14. 請不要將水柱對人眼噴射，以免發生意外。
15. 避免3歲以下兒童使用本產品。
16. 儲存空間要求乾燥和清潔，避免陽光直射和防止熱源。
17. 如果沖牙器需儲存一段時間(超過3個月)儲存前一定要充滿電。
18. 水箱無水狀態下盡量不要運行設備，以免造成設備損壞。

環保提示

棄置產品時，請不要將其與一般生活垃圾堆放在一起，應將其交給官方指定的回收中心，這樣做有利於環保。

處理電池

內充電池含有可能污染環境的物質，丟棄沖牙器一定要將電池取出，到官方指定的回收站處理電池，或將沖牙器送到官方指定的回收站。

如果電池無法拆卸，您可以將沖牙器送至羅曼維修中心。維修人員會幫您取出電池，並以環保的方式處理。

不要隨意拆卸沖牙器的充電電池，只有在丟棄沖牙器時才可以取下充電電池。請確保在取下電池時電量完全耗盡。

拆卸電池

1. 切斷沖牙器電源
2. 讓沖牙器停止運行
3. 打開主機，拆除頂部所有零件
4. 將電池正負極切斷
5. 取出電池

故障種類和處理方法

問題	原因	解決辦法
沒有反應	您剛剛購買的產品或它已被開置超過3個月	a. 連續充電約3.5小時，給機器充滿電 b. 聯繫客服
每次充電後只工作幾分鐘	a. 充電時間不足，電量過低 b. 電池已經達到使用周期	a. 連續充電約3.5小時，給機器充滿電 b. 聯繫客服
水壓低	a. 有污垢卡在噴嘴 b. 噴嘴尖端變形 c. 水泵內有污垢	a. 更換噴嘴 b. 聯繫客服
不出水	a. 儲水器沒有裝水 b. 在使用沖牙器時傾斜角度過大 c. 水管未安裝好 d. 水泵內堆滿污垢	a. 給儲水器裝水 b. 在垂直狀態下與器具一起使用 c. 重新安裝水管 d. 聯繫客服

限用物質含有情況聲明

部件名稱	有毒有害物質或元素						
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 [Cr(VI)]	多溴聯苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	
塑料件	0	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0	0
電路控制組件	X	0	0	0	0	0	0
電機組件	0	0	0	0	0	0	0
電池	0	0	0	0	0	0	0
電源線	0	0	0	0	0	0	0

sOlac

產品保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負責任。
- 保固期間被如有下列之情況亦酌收材料工本費：

1. 未使用說明說或本公司人員所示之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
3. 因火災或其他天災及他人為因素等，所發生故障。
4. 經查證非本公司銷售之機器，無提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
5. 消耗品、附件等(鋰電池)，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
6. 若遺失本保證書，恕不補發。

sOlac 智能行動式沖牙機 SRM-M3W

購買日期： 年 月 日
(保固期限為自購買日期一年內)

機身序號：

經銷商蓋章處

(本保證書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)